

ACCUCHEK® Aviva Nano



# Pour commencer

## Guide de démarrage




### AVERTISSEMENT

Ce guide de démarrage ne remplace pas le manuel d'utilisation de votre lecteur de glycémie Accu-Chek Aviva Nano. Le manuel d'utilisation fournit des consignes importantes à respecter en termes de manipulation ainsi que d'autres informations.

ACCUCHEK®

### Contenu

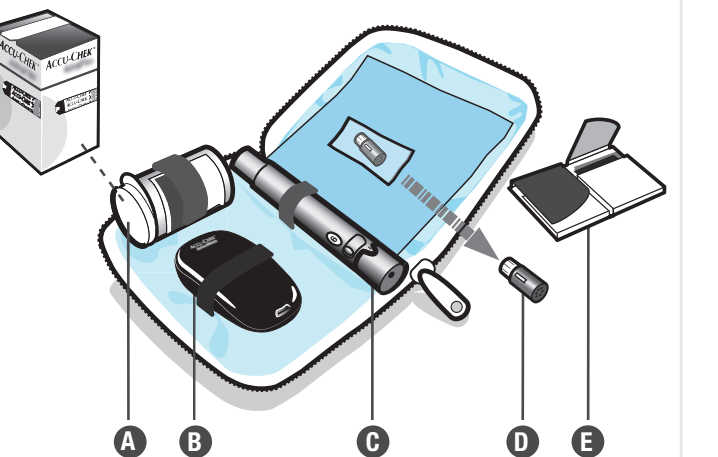

- A. Tube de bandelettes réactives
- B. Lecteur Accu-Chek Aviva Nano avec puce d'activation déjà insérée
- C. Autopiqueur Accu-Chek FastClix
- D. Cartouche de lancettes – contient 6 lancettes
- E. Manuel d'utilisation




### AVERTISSEMENT

L'autopiqueur est conçu exclusivement pour un usage personnel.

### Aucune préparation du lecteur n'est nécessaire


Votre lecteur est fourni calibré et muni d'une puce d'activation **noire** déjà insérée que vous n'aurez jamais à changer. Même si vous utilisez des bandelettes réactives provenant de boîtes de bandelettes réactives contenant une puce d'activation de couleur différente ou de code différent, vous ne devrez plus jamais changer la puce d'activation **noire**.

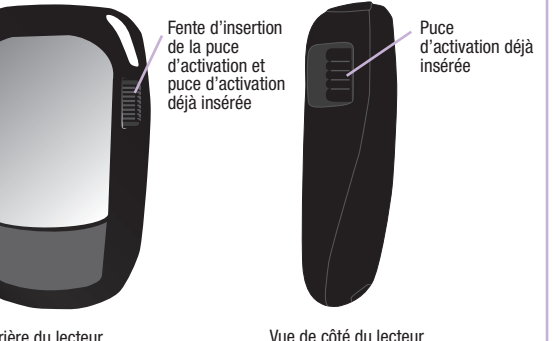


### REMARQUE

Si vous trouvez une puce d'activation supplémentaire en ouvrant une boîte de bandelettes réactives, vous pouvez tout simplement l'éliminer.


### Préparation de l'autopiqueur

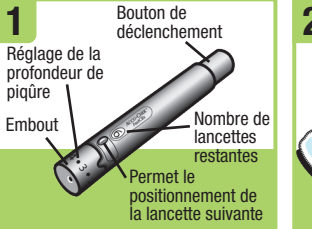


Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l'autopiqueur Accu-Chek FastClix.

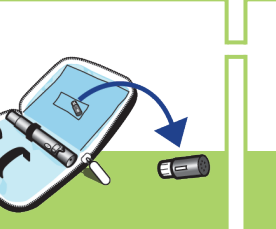


Sortez la cartouche de lancettes de la poche de la trousse de rangement.

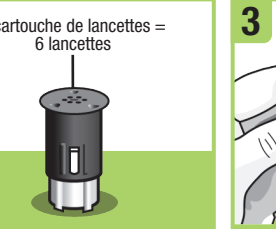

**REMARQUE**  
Chaque cartouche de lancettes contient 6 lancettes stériles.

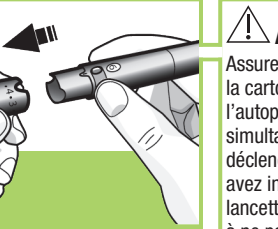

Retirez l'embout en tirant dessus. Ne cherchez pas à visser ou dévisser l'embout.

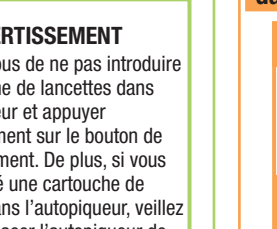


Régalez la profondeur de pénétration de la lancette pour réduire au minimum la sensation d'inconfort éprouvée lors de la piqûre. Commencez sur 2 ou 3. Pour une peau épaisse, réglez sur un chiffre plus élevé.




Utilisation de l'autopiqueur : appuyez sur le bouton de déclenchement de l'autopiqueur pour armer et piquer, cela en 1 seul clic.

### Réglage de l'heure et de la date sur le lecteur

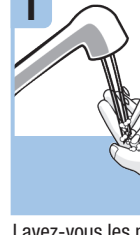

Appuyez brièvement sur la touche . Le lecteur émet un signal sonore, l'indication **set-up** (réglage) s'affiche à l'écran et l'heure clignote.

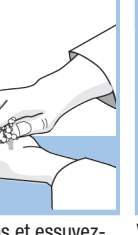

Appuyez brièvement sur la touche pour régler l'heure. Appuyez brièvement sur la touche pour afficher successivement l'heure, les minutes, le jour, le mois et l'année clignotants et effectuez les réglages nécessaires à l'aide des touches ou .

### Réalisation d'une mesure de glycémie



Lavez-vous les mains et essuyez-les avant d'effectuer une mesure de glycémie.



Vérifiez la date de péremption sur le tube de bandelettes réactives. N'utilisez pas de bandelettes réactives périmées.



Retirez une bandelette réactive du tube de bandelettes réactives, puis refermez-le directement.



Insérez la bandelette réactive dans le lecteur en respectant le sens des flèches.



Le code s'affiche brièvement, le lecteur émet un signal sonore et le symbole d'une goutte de sang clignotante s'affiche.



Préparez l'autopiqueur pour la mesure de glycémie suivante. Faites avancer la lancette suivante en faisant coulisser le levier vers l'avant puis en le ramenant vers l'arrière. Le nombre de lancettes restantes apparaît dans la fenêtre située sur l'autopiqueur.

### Messages d'erreur

Consultez immédiatement le chapitre 5, Affichages de l'écran et messages d'erreur, du manuel d'utilisation dès lors que le lecteur affiche l'un des messages d'erreur suivants.

**E-1** La bandelette réactive est peut-être endommagée ou mal insérée. Retirez la bandelette réactive et réinsérez-la ou remplacez-la si elle est endommagée. Si le message s'affiche de nouveau, contactez Roche.

**E-2** Ce n'est pas la bonne puce d'activation. Éteignez le lecteur et insérez une nouvelle puce d'activation. Si vous avez besoin d'une puce d'activation, contactez Roche.

**E-3** Il est possible que votre glycémie soit extrêmement élevée ou qu'une erreur soit survenue au niveau du lecteur ou de la bandelette réactive. Si cela correspond à votre état de santé, contactez votre professionnel de la santé dans les plus brefs délais. Si le résultat ne correspond pas à votre état de santé, recommencez la mesure de glycémie et reportez-vous au chapitre 2, Résultats glycémiques inhabituels, du manuel d'utilisation. Si le résultat de la deuxième mesure ne correspond pas à votre état de santé, effectuez un test de contrôle avec la solution de contrôle et une nouvelle bandelette réactive. Si le résultat de contrôle se situe dans l'intervalle acceptable, assurez-vous que vous avez bien suivi les différentes étapes de réalisation de la mesure de glycémie et recommencez-la avec une nouvelle bandelette réactive. Si le message E-3 s'affiche de nouveau après votre mesure de glycémie, votre résultat glycémique peut être extrêmement élevé et supérieur à l'intervalle de mesure du système. **Contactez votre professionnel de la santé dans les plus brefs délais.** Si le résultat de contrôle se situe hors de l'intervalle acceptable, reportez-vous au chapitre 4, Interprétation des résultats de contrôle hors de l'intervalle acceptable, du manuel de l'utilisation.

**E-4** La bandelette réactive n'a pas aspiré suffisamment de sang ou de solution de contrôle pour que la mesure de glycémie ou le test de contrôle soit possible ou bien l'aspiration suffisante de sang ou de solution de contrôle s'est produite après le démarrage de la mesure de glycémie ou du test de contrôle. Éliminez la bandelette réactive et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle.

**E-5** Ce message pourrait s'afficher à l'écran si vous utilisez une puce d'activation blanche avec le lecteur. La puce d'activation blanche provient d'un lot de bandelettes réactives périmé. Éteignez le lecteur et insérez une puce d'activation noire. Assurez-vous que l'heure et la date du lecteur sont correctes.

**E-6** L'aspiration du sang ou de la solution de contrôle par la bandelette réactive a été effectuée avant que ne s'affiche le symbole de la goutte clignotante à l'écran. Éliminez la bandelette réactive et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle.

**E-7** Une défaillance électronique s'est produite ou, ce qui est rare, une bandelette réactive usagée a été retirée du lecteur et réinsérée. Éteignez le lecteur, puis rallumez-le ou retirez les piles pendant 20 secondes et réinstallez-les. Effectuez une mesure de glycémie ou un test de contrôle.

**E-8** La température est supérieure ou inférieure aux températures préconisées pour l'utilisation du système. Reportez-vous à la notice d'utilisation des bandelettes réactives pour connaître les conditions de fonctionnement du système. Déplacez-vous dans un endroit où la température est conforme à l'intervalle de températures préconisé, attendez 5 minutes et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle. N'essayez pas d'accélérer le réchauffement ou le refroidissement du lecteur.

**E-9** Les piles sont presque plates. Remplacez les piles maintenant. Si le message s'affiche de nouveau après le remplacement des piles, réinitialisez le lecteur. Pour une réinitialisation du lecteur retirez le tiroir des piles du lecteur en le faisant coulisser vers le bas, appuyez sur n'importe quelle touche, puis remettez le tiroir des piles en place.

**E-10** Il est possible que les réglages de l'heure et de la date soient erronés. Assurez-vous que l'heure et la date sont correctes et corrigez si nécessaire.

### REMARQUE

Contactez Roche si le message d'erreur s'affiche de nouveau.

MISE À JOUR : 2012-02

Roche Diagnostics GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim, Germany  
www.accu-chek.com

ACCUCHEK, ACCUCHEK AVIVA, ACCUCHEK AVIVA NANO, and FASTCLIX are trademarks of Roche.  
©2012 Roche Diagnostics  
06647677001(01)-0212

This file may not print or view at 100%.  
Die lines and color breaks do not print.

- Roche USA – 50918  
V4/1 – 06647677001\_01 – Black
- Roche USA – 50918  
V4/2 – 06647677001\_01 – Cyan
- Roche USA – 50918  
V4/3 – 06647677001\_01 – Magenta
- Roche USA – 50918  
V4/4 – 06647677001\_01 – Yellow



0088